



ECLIPSE®

PROBE COVER


Disposable, latex-free protective cover
for medical ultrasound probe/transducers.

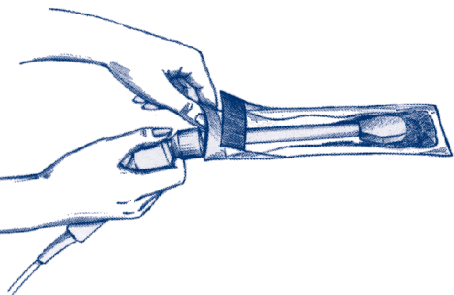

Hold inner white tab while inserting a clean, dry probe/transducer head into pre-gelled ECLIPSE Probe Cover. Gently slide probe until the head reaches the tip of the probe cover.

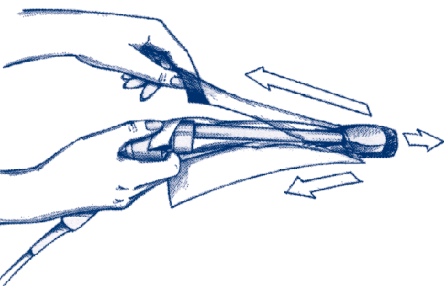

Hold top printed blue tab and gently pull towards you to release the protective outer packaging.

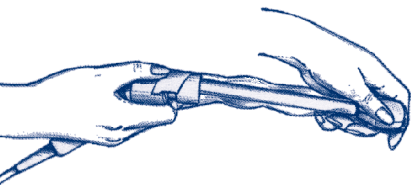

Smooth ECLIPSE Probe Cover over the probe/transducer head to eliminate air bubbles and cover the probe lens with gel, (if air bubbles remain in lens area, gently smooth them away with your thumb). The probe/transducer is now protected and ready for normal use.

For use as a protective cover for medical ultrasound probes/transducers. For professional use only. Use Protex® Ultra Wipes or Protex® Spray to pre-clean probes/transducers prior to high-level disinfection. Refer to ultrasound equipment manufacturer's instructions for cleaning ultrasound probe/transducer between patient uses. This product is not sterile and is not intended to be sterilized.



PARKER LABORATORIES, INC.
286 Eldridge Road
Fairfield, NJ 07004 USA

Phone: (973) 276-9500
Fax: (973) 276-9510
Web: www.parkerlabs.com

Toll Free: (800) 631-8888
E-mail: parker@parkerlabs.com

ECLIPSE®

PROBE COVER

Eclipse® Probe Cover - Latex-free protective cover for medical ultrasound probes/transducers, pre-gelled inside with Aquasonic® 100 Ultrasound Gel. ② For Professional Use only.
Available: 3.25"/1.73"W x 9.5"L (83mm/44mm x 241mm) and
2.5"/1.73"W x 9.5"L (64mm/44mm x 241mm)

⚠ This product is not sterile and is not intended to be sterilized.

Eclipse® Schutzhülle für den Schallkopf - Latexfreie Schutzhülle für medizinische Ultraschallköpfe/Transducer, innen mit Aquasonic®100 Ultraschall-Gel beschichtet. ② Nur zum medizinischen Gebrauch. Lieferbar in den Maßen 83 mm bzw. 44 mm x 241mm, 64 mm bzw. 44 mm x 241mm

⚠ Dieses Produkt ist nicht steril und nicht für die Sterilisation vorgesehen.

Protection d'électrode Eclipse® - Protection d'électrodes et de capteurs médicaux ultrasonores sans latex, contenant du gel ultrasonique Aquasonic® 100. ② Réserve à un usage médical.
Taille disponible: 83 mm/44 mm x 241 mm, 64 mm/44 mm x 241 mm

⚠ Ce produit n'est pas stérile et ne doit pas être stérilisé.

Eclipse® Coperchio per sonda - Coperchio protettivo privo di lattice per sonda/trasduttori medicali a ultrasuoni, il cui interno è stato ricoperto con gel per ultrasuoni Aquasonic® 100.
② Prodotto ad uso esclusivamente professionale.

Dimensioni: 83 mm/44 mm x 241 mm, 64 mm/44 mm x 241 mm.

⚠ Questo prodotto non è sterile e non deve essere sterilizzato.

Cubierta para sonda Eclipse® - Cubierta protectora sin látex para transductores y sondas ultrasonicas médicas, con un revestimiento interior de gel ultrasónico Aquasonic® 100.

② Para uso profesional únicamente.

Disponible: 83 mm/44 mm de ancho x 241mm de largo, 64 mm/44 mm de ancho x 241mm de largo

⚠ Este producto no es estéril y no está pensado para ser esterilizado.

Eclipse® Sondehoes - Latexvrije beschermhoes voor medische ultrasoon sondes/transductoren, vooraf aan de binnenkant met Aquasonic® 100 Ultrasoontransmissiegel behandeld.

② Uitsluitend voor gebruik door deskundigen.

Leverbaar: 83 mm/44 mm b x 241 mm, 64 mm/44 mm b x 241 mm

⚠ Dit product is niet steriel en is niet voor sterilisatie bestemd.

Eclipse® Beskyttelseshætte - Latex-fri beskyttelseshætte til ultralydssonder/transducere, præ-geleret på indersiden med Aquasonic® 100 ultralydsgel. ② Kun til professionel brug.

Fås som: 83 mm/44 mm x 241mm, 64 mm/44 mm x 241 mm

⚠ Dette produkt er ikke steril og ikke beregnet til at steriliseres.

Eclipse® sonskydd - Latexfritt skydd för medicinska ultraljudssonder/transdutorer, förbehandlat på insidan med Aquasonic® 100 ultraljudsgel. ② Endast för yrkesbruk.

Förpackningsstorlek: 83 mm/44 mm (bredd) x 241 mm (längd), 64 mm/44 mm (bredd) x 241 mm (längd)

⚠ Denna produkt är inte steril och skall inte steriliseras.

Eclipse®-anturisuoja - Lateksiton lääketieteellisten ultraääniantureiden suojus. Valmiiksi voideltu sisäpuolelta Aquasonic® 100 -ultraäänigeelillä. ② Vain ammattikäyttöön.

Koko: 83/44 x 241mm, 64/44 x 241 mm

⚠ Tämä tuote ei ole steriili eikä sitä ole tarkoitettu steriloitavaksi.

Cobertura de Sonda Eclipse® - Cobertura protectora sem látex para sondas/transdutores ecográficos médicos, preenchida no interior com gel ecográfico Aquasonic® 100.

② Apenas para Uso Profissional.

Disponível em embalagens de: 83 mm/44 mm x 241 mm, 64 mm/44 mm x 241 mm

⚠ Este produto não é estéril nem se destina a ser esterilizado.

Κάλυμμα ανιχνευτή Eclipse® - Προστατευτικό κάλυμμα, χωρίς λατέξ, για ιατρικούς ανιχνευτές/μορφοτροπίες υπερήχων, το οποίο στο εσωτερικό του έχει επικάλυψη με γέλη υπερήχων Aquasonic® 100. ② Για επαγγελματική χρήση μόνο. Διατίθεται σε διαστάσεις 83χλστ/44 χλστ (πλάτος) x 241 χλστ (μήκος), 64 χλστ/44 χλστ (πλάτος) x 241 χλστ (μήκος)

⚠ Αυτό το προϊόν δεν είναι αποστειρωμένο και δεν πρέπει να αποστειρωθεί.